


ACCU-CHEK® LinkAssist


Comment utiliser le dispositif d'insertion Accu-Chek® LinkAssist pour insérer le set d'infusion Accu-Chek® FlexLink ?

Au préalable, lavez-vous les mains. Choisissez un site à distance de la taille, d'un relief osseux, d'une cicatrice, du nombril ou d'un site de perfusion récent.


Préparez le site en respectant les instructions de votre professionnel de la santé. Laissez sécher la peau avant d'insérer la canule souple.

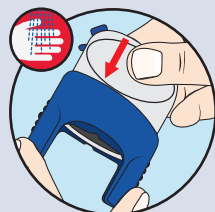


1 Enfoncez le tenseur (partie grise) de l'Accu-Chek® LinkAssist dans sa base (partie bleue).

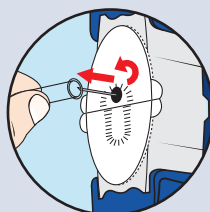


5 Otez avec précaution l'étui de protection transparent du set d'infusion en le retirant tout en imprimant un mouvement de rotation.

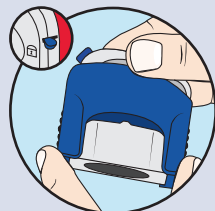


2 L'Accu-Chek® LinkAssist est maintenant armé. Le cran de sécurité s'est enclenché automatiquement pour vous permettre de fixer le set d'infusion Accu-Chek® FlexLink en toute sécurité.

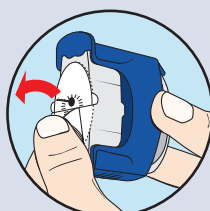


6 Retirez les deux parties du film protecteur de l'adhésif.

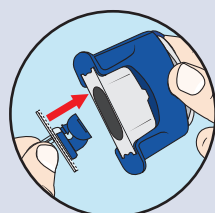


3 Saisissez le set d'infusion par son étui de protection. Orientez le capuchon de maintien bleu vers le haut et enfoncez-le dans le dispositif d'insertion jusqu'à la butée.

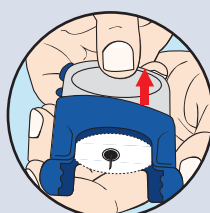

7 Tenez fermement la base de l'Accu-Chek® LinkAssist (partie bleue) d'une main et de l'autre main, tirez le tenseur (partie grise) au maximum vers le haut.

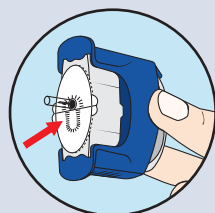

4 Positionnement correct du set d'infusion.
Note: La marque de perforation allongée située sur le film protecteur de l'adhésif vous indique où se trouve le site de connexion de la tubulure.

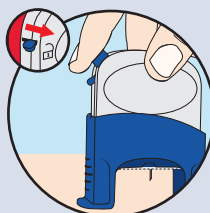

8 Appliquez le dispositif d'insertion Accu-Chek® LinkAssist sur le site préalablement préparé et déverrouillez le cran de sécurité. Appuyez sur le bouton de déclenchement pour insérer la canule dans la peau.

Voir verso




Bouton de déclenchement

Cran de sécurité


Tenseur

Base


ACCU-CHEK® LinkAssist

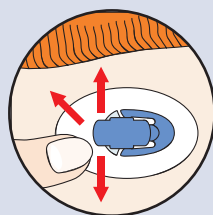


9 Appliquez l'adhésif sur la peau en passant le doigt sur son pourtour.

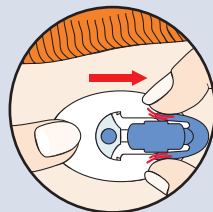

10 Tout en maintenant l'adhésif en place, pressez doucement les clips latéraux du capuchon de maintien bleu et enlevez-le du corps de la canule.

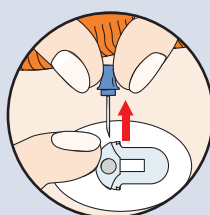

11 Maintenez fermement le corps de la canule en place au niveau du site de ponction puis retirez l'aiguille-guide en la saisissant par la tête.

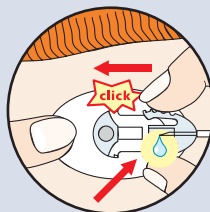

12 La **tubulure purgée*** doit être connectée sur le corps de la canule. Un "clic" audible confirme la bonne connexion des 2 parties du set d'infusion. Purgez le volume mort de la canule avec un bolus de 1.0 unité d'insuline U-100. Mettez votre pompe à insuline en mode marche.

* Comment purger la tubulure de mon set d'infusion ?

Vissez fermement l'embout luer-lock sur le filetage de l'adaptateur de la pompe. Purgez la tubulure de l'Accu-Chek® FlexLink en suivant le mode d'emploi de la pompe jusqu'au moment où l'insuline apparaît à l'extrémité de la tubulure du set d'infusion. Ne laissez pas de bulles d'air dans la cartouche ou dans la tubulure du set d'infusion.

Questions fréquemment posées

Pourquoi utiliser l'Accu-Chek® LinkAssist ?

L'Accu-Chek® LinkAssist a été conçu afin de faciliter l'insertion de l'Accu-Chek® FlexLink. Grâce à l'Accu-Chek® LinkAssist, l'insertion se fait de manière quasiment indolore et totalement hygiénique.

Comment doit être conservé l'Accu-Chek® LinkAssist ?

- L'Accu-Chek® LinkAssist ne doit pas être conservé alors qu'il est armé. Le tenseur doit être complètement hors de sa base.
- Ne conservez pas l'Accu-Chek® LinkAssist à des températures extrêmes: par exemple, dans une voiture chaude en été.

Comment nettoyer l'Accu-Chek® LinkAssist ?

Nettoyez l'Accu-Chek® LinkAssist avec un chiffon légèrement humide, du savon doux pour les mains ou de l'alcool éthylique à 70 %. Ne plongez jamais l'Accu-Chek® LinkAssist dans de l'eau ou du détergent. Séchez soigneusement l'instrument avec un chiffon doux et sec.

L'Accu-Chek® LinkAssist peut-il être utilisé par plusieurs personnes ?

L'Accu-Chek® LinkAssist est uniquement destiné à être utilisé par une seule personne et ne peut donc pas être employé simultanément par plusieurs personnes.

Que faire si le set d'infusion se bloque dans l'Accu-Chek® LinkAssist ?

Si le set d'infusion se bloque dans l'Accu-Chek® LinkAssist, enfoncez à nouveau délicatement le tenseur dans sa base en évitant de le diriger vers quelqu'un. Veillez à ne pas serrer trop fortement la base de l'Accu-Chek® LinkAssist pendant l'introduction.

Accu-Chek®, Accu-Chek® LinkAssist et Accu-Chek® FlexLink sont des marques d'un membre du groupe Roche.
© 2006 Roche Diagnostics.



www.accu-chek.be
Roche Diagnostics Belgium
Schaarbeeklei 198
B-1800 Vilvoorde



ACCU-CHEK®

Vivre sa vie. C'est essentiel.